

Terapi-apparat **"TRIOMED"**

Baserad på MMV & IR
(Millimetervagor & Infrarött ljus)

Modell "TRIOMED-COMPACT 1-8"

Bruksanvisning



Manniskans Resurser AB • Stockholm • 2011

www.mr-ab.se • mail@mr-ab.se • +46 (0)8- 33 49 08

Allmänna principer

Millimetervågsterapi (MMV) – modern hälsobehandling för var och en.

Millimetervågsterapi är, sedan 50 år tillbaka, en väl utforskad terapi i Ryssland och har bakom sig hundratals forskningsresultat och tusentals referenser. Millimetervågsterapi fungerar på ett helt naturligt sätt, med ofta mycket effektiva resultat och utan biverkningar. Den avlägsnar inte bara symptom utan återställer organ och systemstrukturer – en förutsättning för bestående behandlingsresultat. År 2000 fick ryska vetenskapsmän och forskare som tillämpade millimetervågsterapi inom biologi och medicin det största Statliga priset i Ryssland (motsvarande västvärldens Nobel-pris).

Vad är millimetervågor?

Millimetervågor är det språk våra celler använder för kommunikation sinsemellan. Cellen är levande och vibrerar med en viss frekvens. Sådana vibrationer skapar vågrörelser. Det har visat sig att hela världen är genomsvad av supersmå vibrationer, och detta gör det möjligt att förstå existensens av och framtidens utveckling av kroppen. Enligt kvantmekanisk modell har varje föremål en dubbelnatur – en materiell och en elektromagnetisk - där allt vibrerar och varje cell är en del av sammanhanget.

Millimetervågor (= radiovågor) har frekvenser mellan 42,3 och 100 GHz, gigahertz. Det är med dessa vågor våra cellers membran vibrerar och sänder information till varandra. Vid obalans i dessa vågor börjar hälso-problemen att uppstå. Millimetervågsapparaten genererar vågor ungefär med samma styrka som kroppens 10-10 mw/cm², vilket är en miljon gånger mindre än strålning från mobiltelefon.

Hur fungerar millimetervågsterapi?

Det är känt att kroppen består av celler och att varje cell fungerar som en fabrik, som tar emot näring och syre, skapar energi, och för bort slaggprodukter. Detta sker genom cellernas membran. Cellens membranladdning är 60-90 mV, millivolt. Om laddningen är lägre eller högre så fungerar cellen sämre. Instrumentet för millimetervågor producerar samma frekvens som cellernas membran. När frekvensen kommer i kontakt med kroppen skapas resonans som stärker cellens egna vibrationer.

På det sättet ökar millimetervågorna cellmembranens laddning. Laddningen upprätthålls med hjälp av millimeterfrekvenser. När dessa frekvenser ändras, så ändras också laddningen och därmed cellens funktioner. Det är den första effekten av millimetervågornas inverkan.

Den andra effekten har samband med receptorer. På varje cell finns receptorer som tar emot information utifrån. Om receptorerna har nedsatt känslighet för hormoner eller signalsubstanser fungerar cellerna sämre. Varje receptor kan vara mer eller mindre aktiv. Millimetervågorna aktiverar receptorerna så att de blir mer känsliga och tar emot information bättre.

Den tredje effekten av millimetervågor är förbättring av cellernas kommunikation. Människokroppen består av 10¹⁶ antal celler. För att ett sådant komplicerat system skall fungera normalt fordras en viss mekanism för att synkronisera kroppens funktioner. Millimetervågsapparater modulerar kroppens egna frekvenser inom det område som behandlas och fungerar som en synkroniserande mekanism. Den återger kroppen dess egen ”friska” rytmik som den förlorat under sjukdomens gång. På detta sätt återställs kroppens eget system för informationsstyrning.

En av millimetervågors starka effekter är förtunnandet av blodet. Detta är speciellt viktigt för äldre människor.

Millimetervågor sprids i kroppen genom extracellulära vätskor, blodkapillärer, hudreceptorer och energetiska meridianer, som med hjälp av resonans återställer membranernas vibrationer. Detta leder till förbättring av cellernas funktioner och cellernas kommunikation.

Effekter av Millimetervågsterapi

Tester genomförda i Ryssland visar att “oberoende av sjukdomens art så normaliserar millimetervågorna immunsystemets parametrar, förbättrar mikrocirkulationen, balanserar kroppens ämnesomsättning, bromsar åldrandet och därmed förlänger livslängden, förhindrar utveckling av sjukdomar samt övergång av akuta

sjukdomar till kroniska, sänker risken för onkologiska sjukdomar, höjer läkemedlens effektivitet och sänker deras toxicitet och biverkningar, förkortar behandlingstider och förbättrar hälsotillstånd för patienter med hjärtinfarkt och hjärnblödningar, påskyndar läkning av benbrott 2,5-3 gånger samt ger en tydlig smärtstillande effekt.

Eftersom millimetervågor aktiverar cellernas receptorer, vilka blir känsligare för bland annat hormoner och enzymer, används den även med fördel till kosmetisk behandling för att stimulera huden och minska rynkorna. Huden blir mindre fuktig vid åldrande, men genom att stärka cellmembranen och förbättra blodcirkulationen kan spänstigheten återställas”.

Tester

Instrumenten för Millimetervågsterapi har genomgått storskaliga kliniska tester i över 8 år vid de ledande ryska sjukhusen. Bara i Ryssland studerades MMV:s kliniska effektivitet på 20 680 patienter under 1993-2000. I dessa fall uppvisade 96,94 % positiva resultat (tillfrisknande - stor förbättring - förbättring). Den terapeutiska effekten uteblev bara hos 3,06 % av deltagarna. Millimetervågsapparaten är rekommenderad för användning av RF: s (Ryska Federationens) Medicinska Hälsovårdsministerium och har särskilda certifikat. Behandlingsmetoderna är också fastställda av RF: s hälsovårdsministerium.

Sjukdomarnas art	Stor förbättring	Förbättring	Oförändrat	Försämring
Sjukdomar i blodcirkulationsorganen	36,1	61,2	2,7	-
Sjukdomar i skellett-och muskelsystemet	25,7	72,7	1,6	-
Sjukdomar i matsmältningsorganen	73,4	24,1	2,5	-
Sjukdomar i andningsorganen	37,7	53,4	8,9	-
Sjukdomar i nervsystemet	66,4	33,2	0,4	-
Öron-näsa-halssjukdomar	69,4	30,6	-	-
Hudsjukdomar	42,4	54,6	3,0	-
Kirurgiska sjukdomar	93,1	6,9	-	-
Skador på skelett-och muskelsystemet samt ligament	27,3	63,6	9,1	-
Sjukdomar i utsöndrings- och könsorganen	14,3	85,7	-	-
SUMMA	44,5	51,9	3,6	-

Anmärkning: tabellens värden avser andelen av patienter som blivit förbättrade efter en MMV-terapi-kur, i procent.

MMV:s inflytande på blodcellernas hinner är ordentligt undersökt. Man har noterat förbättring av blodbildning, ökad halt av lymfocyter i allmänhet och av T-lymfocyter (viktiga faktorer i immunförsvaret) i synnerhet, samt ökning av antioxidanter och biologiskt aktiva ämnen. MMV normaliserar väsentligt indikatorerna för blodkoagulering vid hjärt- och kärlsjukdomar, bland dem kärlkramp och hjärtinfarkt. Dessutom stimulerar den blodbildning, vilket förklarar dess användning i behandling av onkologpatienter. MMV påverkar även blodkärlens fyllnad, lymfströmmens dynamik, samt transporten av olika ämnen och gaser.

Användningen av den klassiska millimetervågsterapin bygger på att alla kroppens olika system, såsom blod och lymfsystem etc., har resonansfrekvenser inom MMV-intervallet. Man har t ex studerat resonansfrekvenser hos blodets hemoglobin på cellkärnans magnetresonansnivå. Hemoglobinet blir aktiverat vid 42,194 GHz, vilket ökar de röda blodkropparnas förmåga att transportera syre upp till tre gånger. Detta påskyndar läkningen av skadade vävnader och kroppens avgiftning. Därför har behandling med denna frekvens en universell karaktär vid en mängd patologiska processer. Denna metod är, tack vare detta, effektivast vid behandling av områden och zoner med stort blodflöde såsom artärer och vener.

En av de viktigaste mekanismerna i MMV är aktiveringen av endorfiner – glädjens hormoner. Detta påverkar positivt smärtsyndromen, vävnadernas återbildning och kärlens tonus och mikrocirkulation. MMV har en tydligt stimulerande verkan på immunförsvaret.

Den aktivering av kroppens antioxidantsystem, som äger rum vid MMV, blockerar lipidernas oxideringsprocesser, vilka har en roll för både uppkomsten av en del sjukdomar och för deras försämring. MMV har visat sig vara oersättlig vid rehabilitering efter hjärtinfarkt och hjärnblödning, och – vilket är det viktigaste – i förebyggande av dessa sjukdomstillstånd.

Hög effektivitet, minskning av medicinerings och frånvaron av biverkningar som stöds av långåriga kliniska försök, gör att MMV kan rekommenderas för bred användning för behandling och till förebyggande åtgärder mot olika sjukdomar.

De principer, som ligger till grund för metodikerna, är väl utforskade och kliniskt bekräftade av långårig forskning på ryska sjukhus med flera. Apparaten Triomed genomgått ett stort antal kliniska försök innan den blev godkänd och certifierad av hälsodepartementet i Ryssland och EU länder

Den nya teknologin Bio Trem. Apparat Triomed Compact

Bio Trem är en teknologi för reproduktion av elektromagnetiska vågor av mycket hög frekvens – millimetervågor. Denna millimetervågsapparat utgör den senaste generationen av millimetervågsapparater och skiljer sig från föregående generationer genom att den är individuellt anpassad till varje person, är effektivare och enklare att använda. Millimetervågor kallas ibland för "livets vågor" eftersom de används av olika livssystem som informationsförbindelse mellan cellerna och som styrsignaler för reglering och aktivering av adaptiva och regenerativa processer i kroppen. Millimetervågsapparater har funnits i mer än ett halvt sekel och deras verkan är både vetenskapligt och kliniskt bevisad.

Triomed Compact bygger på denna innovativa biomedicinska teknik (BioTrEM: biologiskt styrd elektromagnetisk signaltransduktion), vilken kan lösa många hälsoproblem som andra medel och metoder inte rår på. Dessutom är millimetervågsterapi med Biotrem-teknologi en av de bästa hälsoprofilax som finns att få och erbjuder en unik möjlighet att stärka immunförsvaret och kroppens adaptionsförmåga. För första gången har ryska vetenskapsmän lyckats att skapa en kristall som styrs av kroppens egna celler och producerar exakt de vågor som cellerna behöver för att reparera och anpassar sig på så sätt till varje enskild individ. Med hjälp av teknologin Biotrem kan man nu också skicka millimetervågor på distans. Denna vetenskapligt belagda teknologi är helt unik och saknar motsvarighet i världen. Det är en teknologi som öppnar enorma möjligheter för att förbättra människors hälsa.

1. TILLÄMPNING

Terapi-apparat modell "TRIOMED-COMPACT" är en portabel terapeutisk apparat, som du alltid lätt kan ha med dig i fickan, för behandling och förebyggande (profylax) av olika patologiska tillstånd genom påverkan av lågintensiv elektromagnetisk strålning av extremt hög frekvens EHF eller millimetervågor (MMV) och infrarött (IR) spektrum på vissa områden av den mänskliga kroppen.

Införande av MMV-terapi i den komplexa behandlingen av många hälsoproblem gör det möjligt att påskynda behandlingen, för att minska läkemedelsdosering och för att förstärka dess funktion, minska svårighetsgraden av biverkningar, uppnå positiva kliniska resultat i läkemedelsresistenta patienter.

Apparaten kan användas för att stärka kroppens hälsoresurser.

MMV- och IR-terapiens effekter manifesteras kliniskt i anti-inflammatorisk och aktiverar egna läkningsprocesser, smärtstillande och anti-ödematösa åtgärder, förbättring av vävnadsförnyelse, förbättring av blodcirkulation, för anti-stress, normalisering av autonoma nervsystemets reglering. Inga speciella säkerhetsåtgärder krävs.

2. ANVÄNDNINGSSINDIKATIONER

- ◆◆ Hälsoproblem i perifera nervsystemet
- ◆◆ Hälsoproblem i autonoma nervsystemet
- ◆◆ Hälsoproblem i ÖNH-organ (Öron-Näsa-Hals)
- ◆◆ Hälsoproblem i hjärt-kärlsystemet
- ◆◆ Hälsoproblem i lungor och lungsäck
- ◆◆ Hälsoproblem i mag-tarmkanalen
- ◆◆ Huden och underhudsproblem
- ◆◆ Hälsoproblem i rörelseapparaten
- ◆◆ Gynekologiska problem
- ◆◆ Smärtsyndrom oavsett lokalisering
- ◆◆ Ledpatologi
- ◆◆ Hälsoproblem i ryggraden
- ◆◆ Sår, brännskador
- ◆◆ Allergiska problem åtföljda av hudmanifestationer

3. KONTRAINDIKATIONER

- ◆◆ allmänna kontraindikationer för sjukgymnastik
- ◆◆ ospecificerad diagnos
- ◆◆ individuell intolerans av sådan behandling
- ◆◆ feber av okänd orsak
- ◆◆ implantat med autonoma kraftkällor (i placeringen av enheten).

4. UTFORMNING OCH DRIFT

4.1. Frontpanelen på apparaten (fig. 2) har:

- ◆◆ Styrknapp
- ◆◆ Fyra lysdioder för indikering av tändning av apparaten och verkningssätt.

4.2. Bakstycket är försett med en IR-oscillator (IR-diod) (fig 3). En MMV-generator och batterifacket är placerat under locket på baksidan med två skruvar.

4.3. Sidoytorna av apparaten (bild 1 nedan) bära en ögla och remmar i höljet för att fästa bältet.



Fig 1. Generell vy

- 1. Plats för bälte
- 2. Ögla

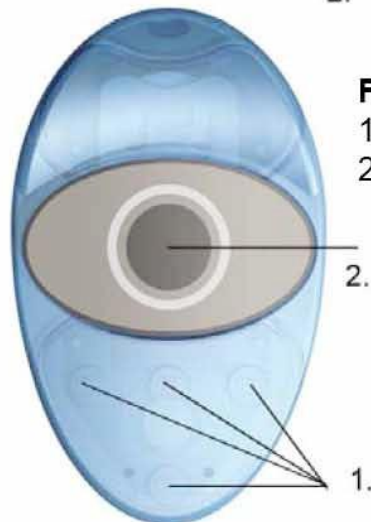


Fig 2. Front

- 1. Ljusindikatorer
- 2. Kontroll-knapp

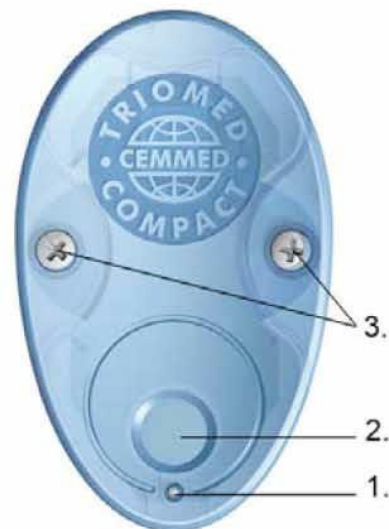


Fig 3. Bak

- 1. IR-oscillator
- 2. Plats för EHF-generator
- 3. Höljets skruvar

4.4. Vid tryck på kontroll-knappen och då man håller den nere, slås apparaten på och i sin tur övergår till de olika programmen som indikeras genom att lysdioder tänds i ca 2 sek i respektive kombinationer (enl fig 4-11). Om kontroll-knappen hålls nedtryckt fortsätter växlingar. Då knappen släpps vid valt program, startar apparaten sin funktion och strålningen sätts på.

4.5. Vid bekräftelse av det valda programmet börjar respektive lysdioder blinka med en period på 3-4 sek (fig 4-11).

4.6. Samtidigt med lysdioder slås summerljudet på. Efter genomgång av programmet stängs apparaten av automatiskt. Det är möjligt att stänga av apparaten halvvägs genom att klicka på kontroll-knappen.

4.7. OBS! Varannan varv av program är med ljud.

4.8. Apparatus kontaktyta mot kroppen eller vatten är baksida. (den lilla runda grop var den fyrkantiga kristallen är synlig)

5. FUNKTIONER

5.1. Driftsrestriktioner

5.1.1. Arbetet med apparaten är tillåtet efter att ha studerat den aktuella användningsmanualen.

5.1.2. Det är förbjudet att:

- ◆◆ att använda andra strömkällor
- ◆◆ att utsätta apparaten för höga mekaniska påfrestningar, stötar, fall
- ◆◆ att hålla elementen på ett avstånd mindre än 50 cm från medicinsk personal, som utför procedurer upprepade gånger eller en tekniker under apparatus underhållande.

5.1.3. Genomträngande av vatten och kemiska ämnen in i apparaten och på dess hölje är förbjuden.

5.1.4. Yttre ytor av apparatus delar ska rengöras med sprit.

5.1.5. Efter förvaring vid temperaturer lägre än 0° rekommenderas start av apparat tidigast efter fyra timmars förvaring i rumstemperatur.

5.1.6. För transport av apparat är det bekvämt att använda konsumentförpackningen. För maximalt skydd packa åter ner apparaten som den ursprungligen var packad av tillverkaren.

5.1.7. Placera inte apparaten på påslagna hushållsapparater.

5.2. Förberedelse för drift

5.2.1. Innan inkoppling undersök apparaten och se till att höljet inte är skadat. Drift av apparat med skadat hölje ÄR FÖRBJUDET!

5.2.2. Prestandatest av apparaten:

- ◆◆ Tryck på kontroll-knappen och håll den intryckt. Apparat ska slås på som indikeras av på varandra följande tändningar av lysdioder i ca 2 sek i olika kombinationer. Med släppande av knappen börjar apparaten köra något av programmen, lysdioder börjar blinka med en period på 3-4 sek, strålningen är påslagen.
- ◆◆ Vid tryck på kontroll-knappen igen utan att vänta till slutet av programmet, kommer att stänga av apparaten.

5.2.3. Problem och felsökning

Avsaknad av ljus- signal betyder fel på apparaten eller urladdat batteri. Kontrollera batteriet och om det behövs, byt ut det. Om byte av rätt batteri inte ledde till påslag av apparaten ska den skickas till verkstad.

Störd ljusordning är ett tecken på fel på apparaten.

I händelse av fel på utrustningen är det nödvändigt att kontakta leverantören (MR AB).

5.2.4. Batteribyte

För att byta batteri, öppna locket genom att skruva av båda skruvarna (se bild 3), ta ut det gamla batteriet och sätt i ett nytt i rätt riktning enligt märkningen på höljet av apparaten och batteriet.

5.2.5. Användaren kan kontrollera apparatens EHF-strålning med hjälp av indikator-apparaten "Skit" för EHF elektromagnetisk strålning producerad av OOO "Triomed" enligt TU 6349-012-61005106-2010 och uppsättningen för konstruktions-dokumentationen (KD) TGKB 435.729.002.

5.3. Säkerhetsåtgärder

I händelse av fel på utrustning krävs inga särskilda säkerhetsåtgärder.

6. ANVÄNDNING AV APPARATEN



Program 0 – Harmoni. Tid 30 min.

Allmän stärkning av kroppen. Detta program skyddar kroppen från negativ inverkan från omgivningen, t ex elektronik och stress. Minskar trötthet, förbättrar sömn, ökar uthållighet, ökar stresstålighet. Sänker elektromagnetisk strålning från diverse elektroniska apparater (t ex mobiltelefoner, datorer mm). Rekommenderad daglig användning 1-5 ggr/dag Apparaten fungerar på distans, men inte mer än 50 cm. Kan påverka en hel grupp av människor.



Program 1 – Universal. Tid: 12 min.

Avgiftning av kroppen, immunkorrigerande, normalisering av ämnesomsättning, förbättring av inre organs funktion. Används lokalt på problemområden, vid akuta och kroniska hälsoproblem.

Kan användas för **FRI-terapi** (Frekvens Resonans Inspelning) och förflyttning av information från kroppen eller andra objekt till vatten. Vid FRI-inspelning, håll kristallen mot objektet i minst 15 sek och stoppa programmet.

Information stannar i apparaten till den ska startas igen, då raderas information. Det går att spela in information från naturprodukter, örter, homeopatiska medel. Vätskor kan spelas in direkt på kristallen, pulver måste först lösas i vatten. Den inspelade informationen kan flyttas till akupunkturpunkter, till vatten eller annan informationsförmedlare, t ex olja, kräm, vax etc.



Program 2 – Terapeut. Tid: 15 min.

Minskar inflammatoriska processer och smärtor. Poskyndar läknings- processen vid sårskador. Vid akuta situationer kan man använda detta program flera ggr efter varandra. Vid kroniska problem kan programmet användas i flera månader. Lägg apparaten mot problemområde och låt verka i 15 min. Eftersom läkningstillståndet förändras kontinuerligt, så spelar också apparaten in ny information varje minut, vilket är den mest optimala behandlingsmetoden med FRI-terapi.



Program 3 – Antistress. Tid: 10 min.

Vid posttraumatisk stress, övertrötthet, irritabilitet, psyko-emotionell irritation och utmattning, överansträngning, extrem irritabilitet, dåligt humör, sömnstörningar. Programmet kan användas på distans upp till 30 cm eller i kontakt med kroppen. Vid kropskontakt förbättras mikrocirkulationen i blodkapillärerna, blodet förtunnas, förbättras lymfcirkulation. Vid distansbehandling förbättras centrala och vegetativa nervsystemet, samt anti-depressiv effekt.



Program 4 – Fenix. Tid: 10 min.

Påskyndar regeneration av skadade vävnader. För behandling av sår, skrubbsår, brännskador, brutna ben och olika inflammationer (inklusive leder). Placera apparat på problem- område och flytta runt i cirkelrörelse.



Program 5 – Edelweiss. Tid: 12 min.

Används vid vävnadshypoxi (syrebrist) och som antioxidant. Programmet ökar vävnaders uthållighet vid syrebrist. Förbättrar mikrocirkulation i kapillärer/små blodkärl. Förbättrar andningssystemets funktion. Ökar cellers syreupptag. Ger antioxidanteffekt – för eliminering av fria radikaler. Rekommenderad användning vid kroniska sjukdomar relaterade med förgiftning eller dålig mikrocirkulation, samt problem med andningsorgan.



Program 6 – Föryngring. Tid: 12 min.

Används för föryngring av kroppen. Normaliserar ämnesomsättningen, förbättrar blodcirkulationen som gör att cellerna och deras receptorer förbättras och återställs. Därför förbättras alla inre organs funktioner, vilket leder till föryngring av kroppen. Detta program optimerar nivån av könshormoner. Programmet kan även användas för kosmetiskt ändamål i ansiktet. Rör apparaten från mitten av ansiktet och utåt i pannan, från näsan, mungiporna, hakan och runt ögonen.



Program 7 – Foton (IR, infraröd). Tid: 5 min.

Apparaten har även en IR-stråle bredvid kristallen. Denna foton-terapi optimerar cellernas energetiska funktioner. Optimerar cellernas inre funktioner. Används vid kroniska inflammatoriska processer, problem med perifera nervsystemet, olika smärtor. Används 5 min per område eller punkt. Kan ha kontraindikation (ska ej användas) vid cancer, tuberkulos och rekommenderas ej runt ögonen.

Rekommenderat att kombinera olika program, för att de komplettera varandra.

Gör uppehåll några dagar per vecka.

Praktiska rekommendationer vid användning av Triomed Compact

Det finns många användningsområden med Triomed Compact, man kan:

- Sända ut millimetervågor lokalt på problemområdet med ett av programmen som finns i apparaten
- Sända ut millimetervågor på olika zoner som är sammankopplade med olika organ eller kroppsdelar
- Sända ut millimetervågor på akupunkturpunkter
- Sända ut millimetervågor till vatten och på så sätt strukturera vatten
- Spela in information från problemområdet och sända tillbaka med avstängd apparat
- Spela in information från problemområdet och överföra till vatten, sedan dricka det vattnet
- Spela in information från problemområdet och överföra till blodet via pulsådern
- Spela in information från akupunkturpunkter och sända tillbaka med avstängd apparat
- Spela in information från saliv eller urin och överföra till vatten
- Spela in information från olika vätskor, örter, oljor

Några viktiga råd vid användning av Triomed Compact:


1. Kom ihåg att arbete med millimetervågsterapi ökar kroppens motståndskraft och hjälper kroppen att aktivera egna läkande resurser.
2. Även om det finns flera olika program att välja bland och du inte vet vilket du ska välja, så kan du aldrig göra fel eftersom alla program är gynnsamma för kroppen. Välj bara det program som ligger närmast ditt problem. Harmoni-programmet kan man använda 3-5 gånger per dag och varje dag utan uppehåll. Programmen 3, 4, 5, 6 kan man använda 30 minuter per dag och sedan alltid göra uppehåll 2 dagar efter 5 dagars användning. Behandlingar med program 7 kan kompletteras med program 3, 4, 5, 6, så tiden kan överskrida de dagliga 30 minuterna, d.v.s. sammanlagt 35 minuter per dag. Program 2 kan man använda obegränsat några gånger per dag utan uppehåll.
3. Behandling av lokala områden samt behandling av zoner, 10-15 minuter, behandling av akupunkturpunkter, 3-5 minuter.
4. Om man jobbar med akupunkturpunkter eller zoner är det inte nödvändigt att hitta det exakta området eller punkten, det räcker med att komma i närheten. Millimetervågor tar sig alltid dit där det finns mindre elektriskt motstånd, och svaga områden och punkter har alltid ett svagare elektriskt motstånd.
5. Vatten struktureras genom att apparatens kristall kommer i kontakt med vattenkannans vägg (det ska vara glass inte mer än 2 mm) och hålls mot väggen i 10-15 sekunder.

För att maximera effektiviteten av användandet av Triomed Compact vid olika hälsoproblem, rekommenderas att kombinera de olika möjligheterna som **Triomed Compact** erbjuder. Det finns tusentals olika hälsoproblem, och att ge specifika behandlingsrekommendationer till alla är omöjligt. Men det behövs inte heller, då vi inte behandlar symptom utan vi hjälper kroppen att själv bli av med problemen. Därför att det finns allmänna regler vilka kan man följa upp för att åstadkomma bra resultat med vilket hälsoproblem som helst.

Försök använda oftare program harmoni för att allmän stärka kroppen


1. Kombinera alltid arbete med lokala problem platser, zoner och huvud akupunktur punkter
2. På problem lokala platser använd oftare program 5 för att förbättra syreupptaget av cellerna och minska fria radikaler
3. Kombinera arbete med olika program på lokala platser med program 2- inspelning av information
4. För mild utrensning av kroppen oftare spela information från saliv eller urin och överför till vatten. Inspelning gör på morgonen på fastande magen
5. För att allmän stärka hälsa och balansera kroppen använd då och då de 10 viktiga akupunktur punkter, genom att växla de med 3-4 punkter per dag
6. Drick oftare strukturerat vatten

Viktiga zoner som påverkar allmänna fysiologiska processer i kroppen

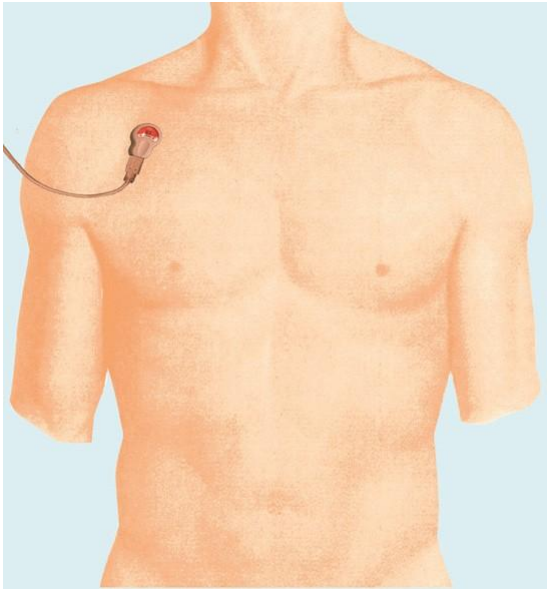


Nära nyckelbenen. Aktiverar återhämtning och regenerativa processer i kroppen. En förutsättning för förbättring av alla slags hälso-problem är just återhämtning.

Nära armbågen. Normalisering och optimering av ämnesom-sättningen på alla nivåer. Detta är grunden för god hälsa.

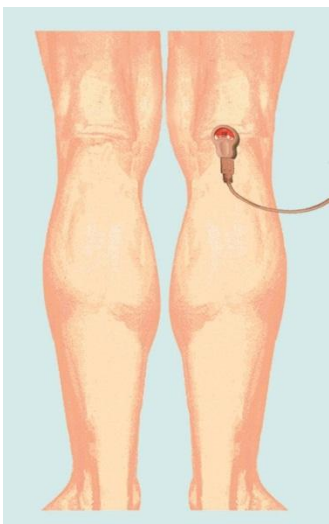


Runt knät och i knävecket. Prevention och behandling av alla former av bindvävsdegeneration (åderförkalkning, ärrbildning, cirros). Om bindväv ersätter organs vävnad kan hälsoproblem uppstå.

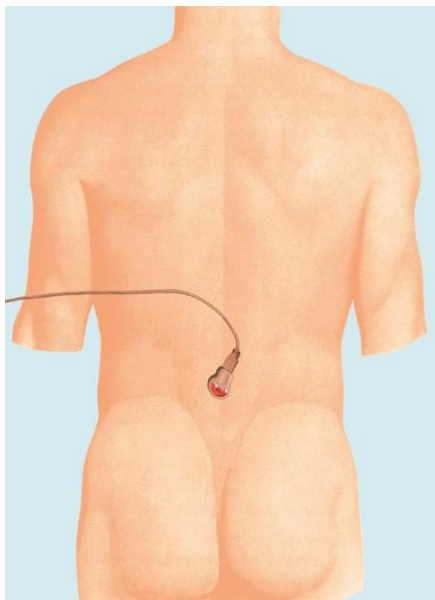

Nedre delen av ryggraden. Optimerar funktioner av organ i bukhålan (under diafragman), bäcken och ben.

Under sjunde kottan. Balansering av nervsystemet.


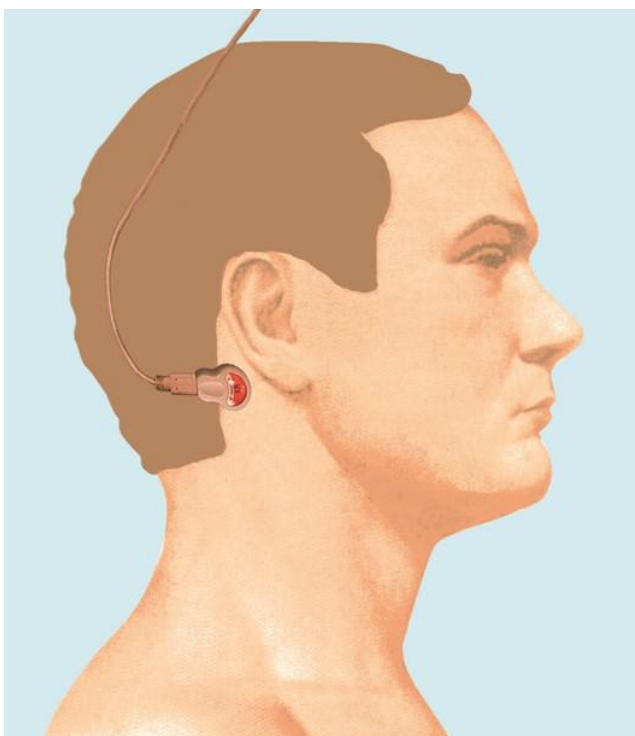


Bakom örat. Förbättring av funktioner i det centrala vegetativa systemet. Svett, torr hud, dåsighet eller aggressivitet, lågt eller högt blodtryck, hög feber.




Främre bukväggen. Optimerar funktionen i tunntarmen. Tunntarmen är ett oerhört viktigt organ. Här sker matsmältning och absorption och här genereras energi.

In sidan av armbåge. Ger detox effekt och optimerar funktioner av immunsystemet.

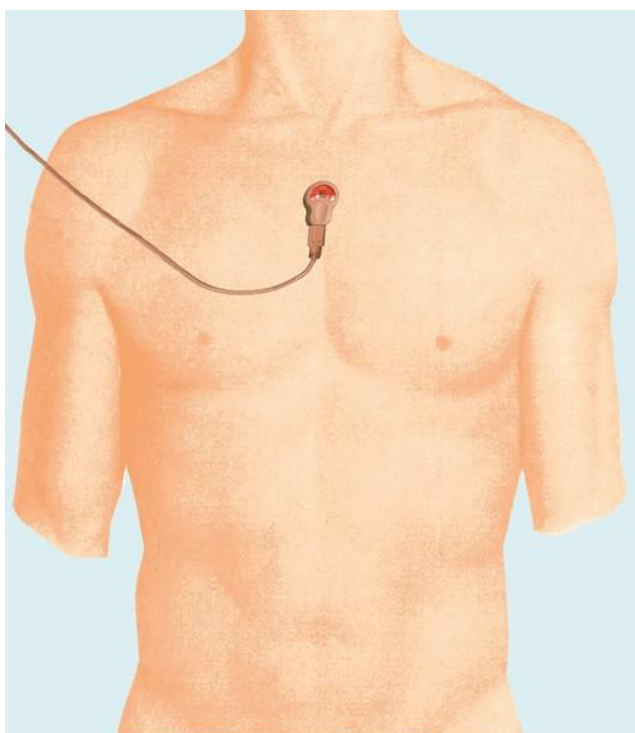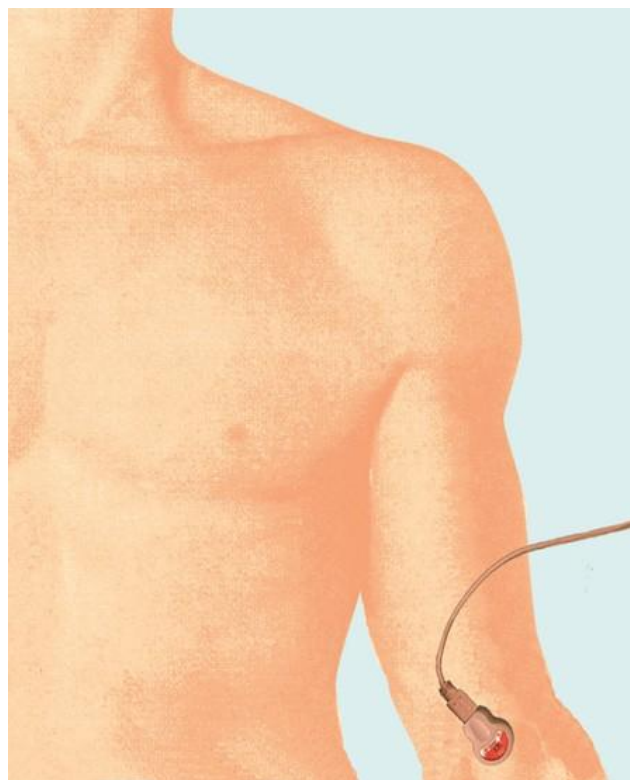


Bröstbenet. Förbättrar de reglerande mekanismerna i det vegetativa nervsystemet och immunsystemet. Användas ofta vid allergier

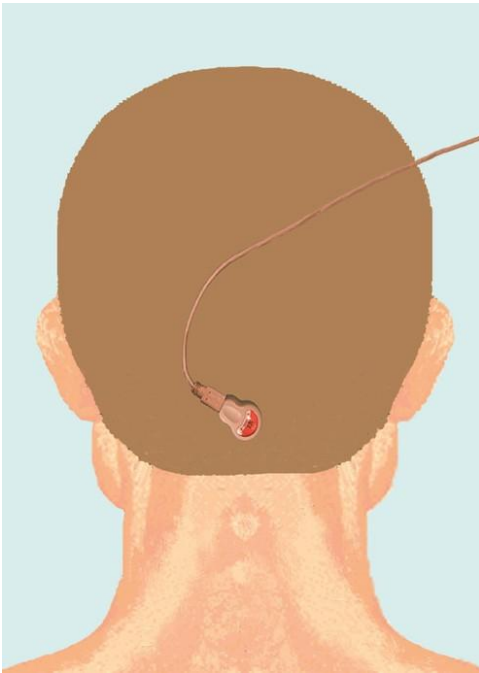

Bakhuvudet, i gropen. Reglering av hypofysen och hypothalamus

Kosmetisk behandling

Arbeta från centrum mot periferin 20 sekunder på varje punkt. Massera efteråt i samma riktning

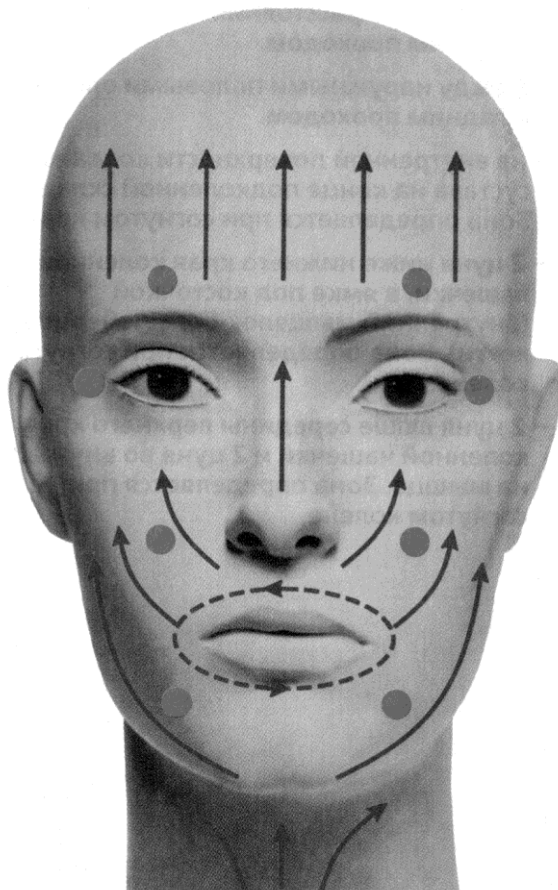


Allmän balansering av kroppen, tio punkter

Tjocktarmsmeridianen

GI-4

Mellan tummen och pekfingret,
i gropen

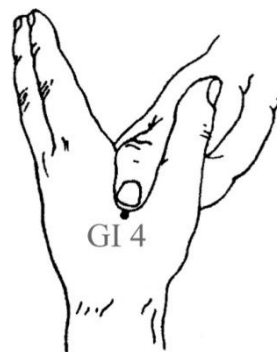

GI-11

På slutet av vecket i armbågen.



Magmeridianen

E-36


3 chon under den nedre kanten
av knäskålen och 1 chon från
skenbenskammen, på utsidan av benet.



Njurmeridianen

R-1


I mitten av fotsulan, i gropen.

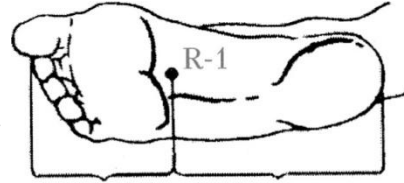

Mjältmeridianen

RP-6

Bakom skenbenet,
3 chon ovanför
mitten av inre fotknölen,
på muskeln.

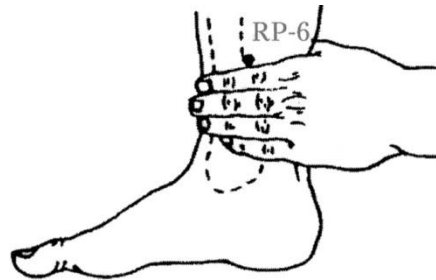


Bakre centralmeridianen

VG-20

På mittlinjen, 7 chon uppåt
från bakre hårfästet eller
5 chon bakåt från
främre hårfästet

VG-20

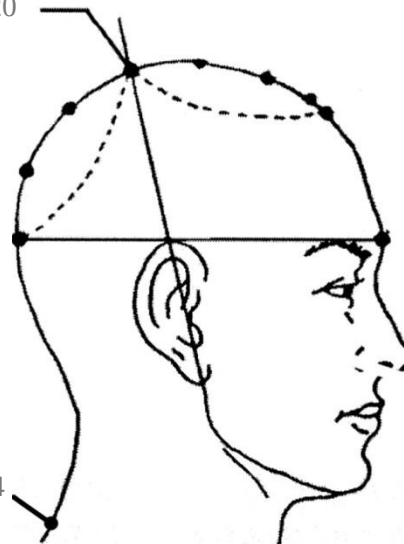

VG-14


Under sjunde halskotan
(mest framträdande),
mellan ryggkoteutskottet
av sjunde halskotan och
första bröstkotan

VG-14

Hjärtmeridianen

C-7


På handlovens veck, i gropen

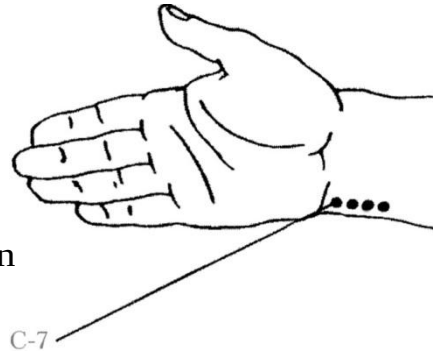

Främre centralmeridianen

VC-17

På mittlinjen, 6 chon under
halsskåran, på bröstbenet,
i gropen

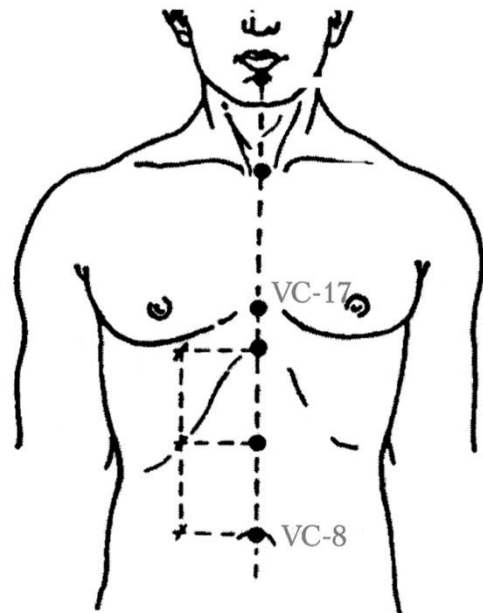


VC-8

I mitten av naveln


Tummåttet

Tummens bredd i höjd med interphalangealeden motsvarar 1 cun (**chon**).

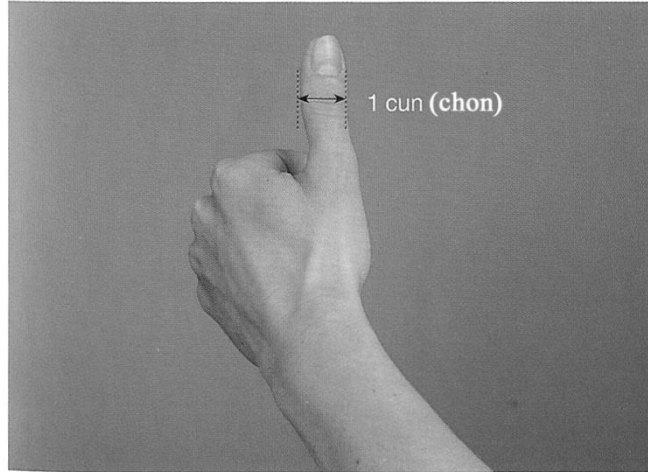


Tvarfingermåttet

Den sammanlagda bredden av pek-, lang-, ring-, och lillfinger (i höjd med de stora fingrarnas proximala interphalangealled) motsvarar 3 cun (**chon**).

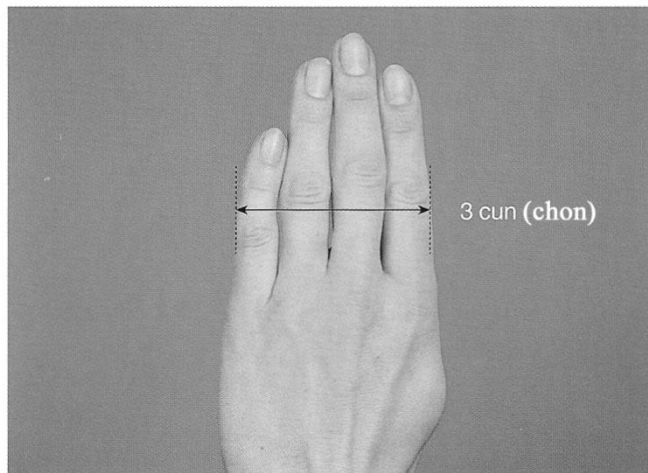


Projektions zoner av motsvarande organ, den främre ytan av kroppen.

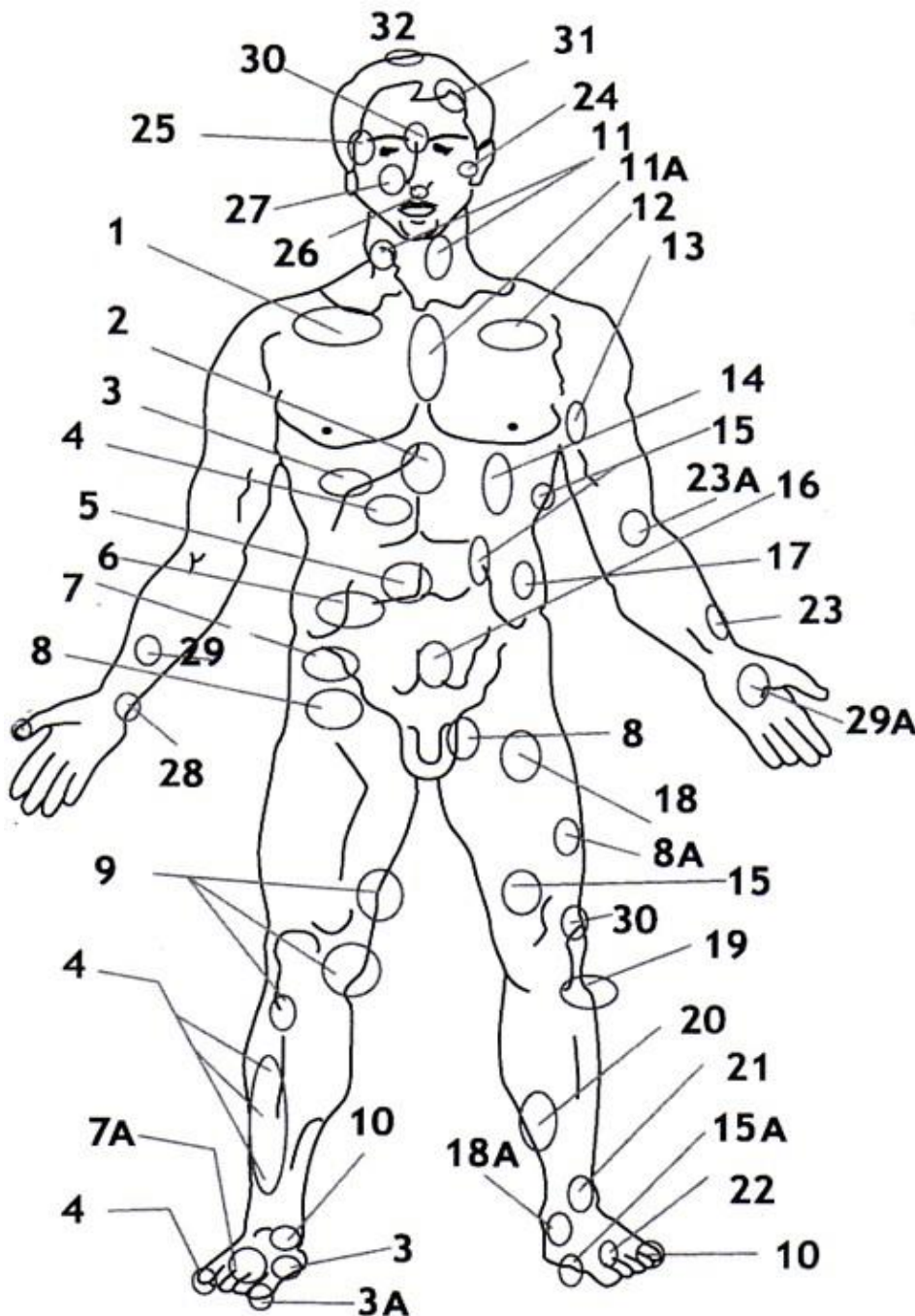

1. Lungsjukdomar.
2. Gastrit. Halsbränna.
3. Levern. Hepatit. Matsmältningsbesvär.
- 3A. Koncentration.
4. Gallblåsan.
5. Tarmproblem.
6. Tjocktarmen.
7. Njursjukdom.
- 7A. Sjukdomar i nässvalget.
8. Höftleden.
9. Knäled, artrit.
10. Sjukdomar i gallblåsan och njurarna.
11. Kranskärslsjukdom. Andnöd.
- Halsont. Sköldkörteln.
- 11A. Bronkit. Ökad immunitet.
- Muskelknutor.
12. Kronisk hjärtsvikt.
13. Kranskärslsjukdom. Smärtan i hjärtat.
14. Mjälte.
15. Bukspottkörteln.
16. Prostata, livmoder, urinblåsa.
17. Kolik. Förstoppning.
18. Sexuella störningar. Artärerna i bäckenet.
19. Minskad matsmältning. Artärer.
- Stress. Cerebral pares.
20. Störningar i menstruationscykeln.
- För blödning.
21. Förvärring av synen. Åderförkalkning.
22. Sjukdomar i magen och levern.
- Toxiner.
23. Svullnad.
- 23A. Adaptation. Immunförsvar.
- Toxicosis.
24. Kollaps. Åderförkalkning.
- Hypofys.
25. Berusning. Smärtan i huvudet.
- Syn. Hypofys.
26. Shock. Kollaps. Koma. Hypofys.
27. Sinuit, neurit av ansiktsnerven.
- Kosmetologi.
28. Sänka blodtrycket. Stress.
- 29A. Vener. Andnöd. Högt blodtryck.
- Stress. Lever.
- 29B. Högt blodtryck.
30. Hjälp med en baksmälla.
31. Sömnlöshet. Högt blodtryck.
32. Shock. Kollaps. Cirkulationssrubbningar i hjärnan.

Projektions zoner av motsvarande organ i baksidan av kroppen.

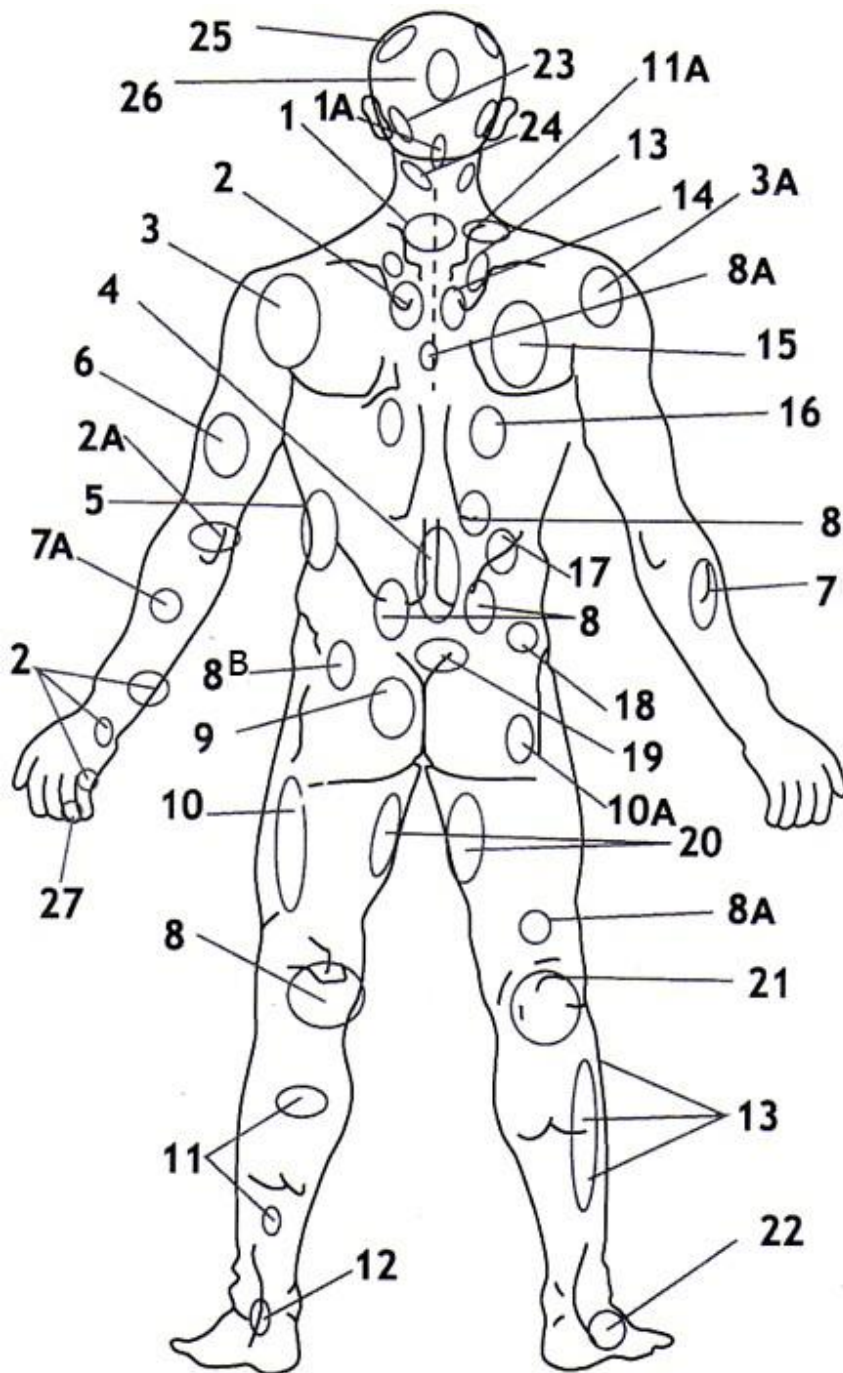

1. Hela ryggraden. Immunförsvar.
- 1A. Kranskärslssjukdom. Cerebral pares.
2. Hjärtat. Andnöd. Lungorna. Benet.
- 2A. Metabolism. Reglering av katekolaminer.
3. Mjälte.
- 3A. Åderförkalkning. Blodproppar.
4. Magsår. Problem i ländryggen.
5. Bukspottkörteln.
6. Sjukdomar i magen.
7. Avgiftning av kroppen. Det lymfatiska systemet.
- 7A. Tjocktarmen.
8. Problem med njurarna.
- 8A. Magsår.
- 8B. Ischias. Diskbråck.
9. Sexuella rubbningar. Stagnation i bäckenet.
10. Höftleden.
- 10A. Gikt. Höftleden.
11. Skada på urinledaren. Ischias.
- 11A. Kranskärslssjukdom. Takykardi.
12. Urinblåsan. Narkos. Kranskärslssjukdom. Kapillärerna. Ischias. Neuropati.
13. Gallblåsan. Stenarna.
14. Gallgångarna. Blod sjukdomar.
15. Lungsjukdomar.
16. Problem med levern.
17. Återuppbyggnaden av binjurarna. Prostatit.
18. Tunntarmen.
19. Bäckorganen. Äggstockarna.
20. Sexuella problem. Climax. Levern. Klåda.
21. Knäleden. Ligament.
22. Avvikelser i ändtarmen. Adenom. Muskelknutor.
23. Stress. Hysteri. Syn. Astma. Minne.
24. Högt blodtryck. Nacken.
25. Facial nerver. Kollaps. Shock. Kris. Hörsel.
26. Avvikelser av cerebralt blodflöde.
27. Toxiska komplikationer. Metabolism.